




Paciente e dentista perfeitamente integrados.

O KaVo AQIA foi projetado para tornar a experiência odontológica ainda mais prática e confortável até mesmo em seus detalhes. Investimos no desenvolvimento e ouvimos as necessidades de profissionais de várias partes do mundo para trazer as soluções que tornam o KaVo AQIA não apenas um equipamento, mas uma ferramenta de produtividade e satisfação. Além das características de excelência da marca, como ergonomia, biossegurança e versatilidade, o KaVo AQIA traz benefícios que vão além do consultório, como conforto, rentabilidade e satisfação.

Conheça um pouco mais da cadeira:

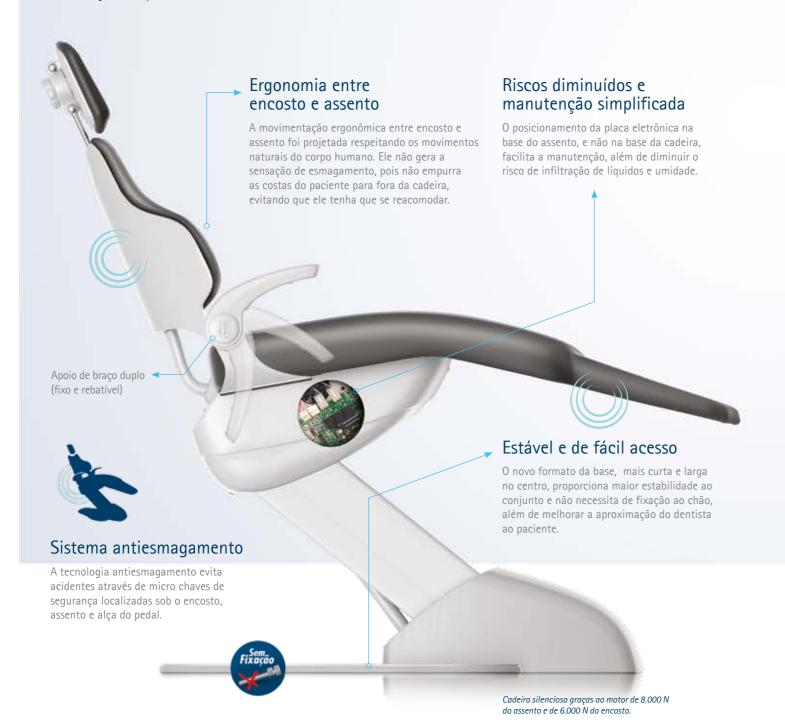







O novo formato do encosto mais amplo, proporciona conforto a pacientes de diferentes biotipos e, para os dentistas, melhora o acesso ao paciente.



Cabeceira mais anatômica

Se ajusta à altura do paciente, proporcionando melhor acomodação e segurança durante o tratamento. Formato mais anatômico, que garante apoio na região cervical do paciente.



Espuma injetada de longa vida

Garante conforto ao paciente e maior durabilidade, evitando deformações. Estofamento revestido em laminado 100% PVC e sem costuras, garante fácil higienização.









Bandeja inox com borda ampla

Feita em aço inoxidável e com uma borda ampla, a bandeja do equipamento protege totalmente a parte plástica superior da mesa, evitando riscos e manchas.

Suporte dos instrumentos

A angulação permite que o dentista manuseie os instrumentos livremente sem tocar nas pontas, evitando acidentes.

Puxadores metálicos e biosseguros

Seu formato aberto permite a utilização de campo cirúrgico e outros materiais de proteção contra contaminação cruzada. Além disso, com a mesma capa é possível proteger o botão de acionamento do braço pneumático que localiza-se no próprio puxador, o que também



Modelos de mesas disponíveis:

- ✓ Mesa S com braço pneumático
- ✓ Mesa T com braço pneumático
- ✓ Mesa Cart com rodízios

ACESSÓRIOS



Chip Blower

Saída de ar seco pelo canal do spray do instrumento, permite secar a cavidade do dente sem a necessidade de utilizar a seringa tríplice

Negatoscópio

Com iluminação LED

Micromotor elétrico KaVo INTRA LUX® KL 701

- Motor sem escovas (Brushless) garante desgaste
- Sistema anti-refluxo KaVo Stop. Garantia no micromotor contra o retorno de água do spray contaminada.
- Pesa menos de 100 gramas.
- Muito silencioso.
- Rolamentos intercambiáveis. Podem ser substituídos em caso de manutenção.
- Rotações de: 100 rpm a 40.000 rpm, com torque máximo de 2.7 Ncm



ULTRAscaler

Piezo elétrico com frequência máxima de 30.000 Hz. Acompanha 4 ponteiras



KaVo. Dental Excellence.

Suctora KaVo, biossegurança e estética andam lado a lado.

Suctora com design totalmente novo e diferenciado, exibe formas arredondadas e uma estrutura vertical. Ocupa menos espaço no consultório e o visual fica ainda mais clean com as garrafas embutidas. A cuba giratória em 180º beneficia tanto o dentista como o paciente. O braço extensor possui 2 opções de tamanho e possibilita a utilização de até 4 pontas: 2 sugadores, fotopolimerizador e seringa tríplice auxiliar.



Garrafa embutida com visor

Mais bonita, a suctora envolve as garrafas de água do Spray e Assepto Sys em um alojamento que foi projetado para tornar o encaixe prático e intuitivo.

Garrafa com maior autonomia

Com uma capacidade maior, a garrafa (1,5L para spray e 1,0L para Assepto Sys) dá autonomia de alimentação e melhora a produtividade, já que o profissional não precisa repor a água a todo instante.



- ✓ Água na cuba temporizada através de acionamento no pedal, teclado do equipo e mesa auxiliar.
- ✓ Água no copo de série, com acionamento elétrico e esquicho metálico, removível e autoclavável.



Cuba cerâmica com diâmetro ampliado de 24 cm. Reduz o risco do paciente sujar fora da cuba. A cuba cerâmica é removível e autoclavável.



OPCIONAIS / ACESSÓRIOS			
Assepto Sys Plus Assegura a limpeza interna do sistema de água, da garrafa até a ponta das mangueiras e seringa.	Kit sucção central - converte os sugares Venturi para Bomba a Vácuo. Inclui função vacuum stop - Liga e desliga o Sugador		
	Braço auxiliar longo (o braço auxiliar curto é de série)		
Kit filtro de ar/dreno Kit filtro de água	Boiler na água do copo Água no copo aquecida em aproximadamente 35°C		
	Assepto Sys Plus Assegura a limpeza interna do sistema de água, da garrafa até a ponta das mangueiras e seringa. Kit filtro de ar/dreno		



Refletores KaVo LED: aproveite mais da tecnologia LED!

Seguindo a tendência de tecnologia mundial de iluminação, a KaVo apresenta a nova linha de refletores a LED: KaVo LED e KaVo LED : Além da economia de energia e maior vida útil, a iluminação LED proporciona conforto ao paciente e ao dentista, uma vez que não aquece o campo de trabalho.

Além de excelente iluminação, os novos refletores apresentam acabamento refinado, resistência e praticidade.

Todos os modelos de refletores possuem programação de ligar e desligar sincronizados com os movimentos automáticos da cadeira, ou seja, se for acionada a função volta a zero, a cadeira desligará o refletor durante o movimento, e quando o movimento parar, o refletor voltará a ligar automaticamente.

lluminação

Os leds foram projetados para criar uma potência de iluminação mínima de 6.800 LUX (+/-17%), podendo ser ajustada de acordo com a necessidade do procedimento, chegando na intensidade máxima de 30.000 LUX (+20%). Além disso, o refletor oferece um foco único e preciso sobre a boca do paciente.







Movimentação ampla e precisa

A articulação do cabeçote possui liberdade de movimentos, oferecendo um manuseio suave e preciso. Os braços mais longos e a flexibilidade de articulação do refletor permitem uma iluminação direta na arcada inferior lingual do paciente e atendimento de pacientes cadeirantes.

Biossegurança e Praticidade

Puxador duplo, aberto e em aço inox, ideal para biossegurança. Além disso, o refletor não possui aberturas, sua superfície é lisa e seus cantos arredondados, facilitando a limpeza do consultório. Sua estrutura é feita em alumínio, o que confere robustez ao refletor e evita o aquecimento do cabeçote.



Este é o principal diferencial do refletor KaVo LED ⊡, que foi desenvolvido utilizando LEDs especiais que não

Essa característica evita a polimerização precoce das resinas, dando mais tempo ao dentista para a sua

REFLETOR KaVo L E D 🛨

possuem a cor azul na sua composição.

Função **±**

preparação.

A luz branca é composta pelas cores vermelha, verde e azul (RGB). A cor azul é responsável pelo processo de fotopolimerização das resinas compostas. A função ⊡ elimina a cor azul da composição, resultando em luz amarela, desta forma retardando o processo de fotopolimerização.



Sensor LED ±

Acione a função

de forma biossegura, sem tocar no refletor, através do sensor de aproximação no centro do cabeçote do refletor.

Refletor halógeno

Refletor com proteção em policarbonato e puxador duplo. Utiliza uma lâmpada halógena e possibilita regulagem de intensidade de luz de 8.000 a 25.000 LUX.





Novas cores KaVo AQIA.



Configurações KaVo AQIA.

	S	3 Sistemas de segurança antiesmagamento – abaixo do encosto, assento e alça do peda	
•	•	Cabeceira bi-articulada com apoio cervical e ociptal adequada para diferentes biotipos	
		de pacientes	
•	•	Apoio de braço duplo e rebatível	
•	•	Estofamento Komfort injetado em espuma de alta durabilidade, revestido com laminado 100% PVC e sem costura	
		Cadeira sem necessidade de fixação no piso	
		Base da cadeira com proteção anti-derrapante	
A	(A)	Kit Capô auxiliar	
(A)	(A)	Main Switch – interrompe a parte elétrica, linha de ar e água do conjunto	
		Equipo	
		Mesa para até 5 terminais	
0	•	Hastes aéreas com duas posições de trava	
0		Berço para peças de mão feito em material soft e removível	
•	0	Seringa tríplice com ponteira autoclavável	
0		Seringa triplice destacável	
•	•	Teclado touch para acionamento das funções da cadeira, refletor, peças de mão e suctora	
0		Puxador duplo, aberto e metálico	
•	0	Bandeja de aço inox com borda ampla	
0		Bandeja auxiliar lateral	
•	•	Regulagem externa e individual de água e ar do spray das peças de mão	
		2 Mangueiras Borden	
A	A	Micromotor elétrico KL701	
A	(A)	Kit Spray On/Off e Chip Blower	
0	0	Mesa cart com rodízios	
		Braço com acionamento pneumático	
(A)	0	4º e 5º mangueiras - Kit conexão mangueira MULTIflex sem luz (fixa)	
0	A	4ª e 5ª mangueiras - Kit conexão mangueira MULTIflex sem luz (destacável)	
A	0	4ª e 5ª mangueiras - Kit conexão mangueira MULTIflex LED (fixa)	
0	A	4º e 5º mangueiras - Kit conexão mangueira MULTIflex LED (destacável)	
(A)	0	4º e 5º mangueiras - Kit conexão mangueira Borden (fixa)	
0	A	4º e 5º mangueiras - Kit conexão mangueira Borden (destacável)	
(A)	A	Negatoscópio LED para até 4 radiografias periapicais	
A	(A)	ULTRAScaler - ultrassom de até 30.000 Hz	
A	(A)	SONICborden - destartarizador pneumático de 6.000Hz com conexão Borden	
	A	SONICflex - destartarizador pneumático de 6.000Hz com conexão MULTIflex	
A	(A)	ULTRAjet Flex – Jato de bicarbonato com conexão MULTIflex	
		Suctora	
•	•	Suctora fixa à cadeira – acompanha o movimento da cadeira	
		Água no copo com acionamento elétrico	
•	•	Acionamento temporizado de água na cuba	
		Sugador Venturi 6,3mm	
•	•	Mesa auxiliar para até 4 terminais	
		Garrafa de água embutida de 1,5L	
		Teclado touch para acionamento das funções da cadeira, refletor, peças de mão e suctora	

- O Opcional item a ser escolhido no momento da compra vem de fábrica
- Acessório item a ser instalado no consultório
- ⊘ Não disponível







KaVo e Kerr, juntas e com o mais completo portfólio para equipar seu consultório.

Só uma marca líder e reconhecida por profissionais de odontologia de todo o mundo pode proporcionar a você uma experiência cada vez mais completa. Além da alta tecnologia em instrumentos, equipamentos e diagnóstico por imagem, a Kerr se une à KaVo para oferecer também as melhores opções em materiais dentários.

Nossos produtos são projetados tendo você em mente. Eles são inteligentes, para que você possa trabalhar com mais inteligência. Eles são eficientes, para que você possa otimizar o seu fluxo de trabalho. Eles são confiáveis, para que você fique mais confiante em seu resultado - o que lhe permite viver mais a vida fora do consultório.

A KaVo cuida para que paciente e dentista estejam sempre em ótimas condições de higiene, ergonomia e tenham uma proteção segura contra infecções durante todo o tratamento.

Nossos produtos proporcionam ao paciente conforto e segurança e ao profissional maior confiança e comodidade durante o seu trabalho.

Já a Kerr, com sua linha de consumíveis, foca em compósitos, adesivos, materiais de moldagem, cimentos e acessórios para restaurações e profilaxia e tem descoberto novos caminhos trazendo o que há de melhor em produtos.

Temos uma relação de reciprocidade com os dentistas. Quando os clientes falam, nós escutamos e continuamos a desenvolver produtos que ajudem o seu trabalho a ficar ainda melhor.

O Grupo KaVo Kerr oferece os produtos e soluções mais abrangentes, tudo o que o profissional da Odontologia usa em seu trabalho diário. Cada produto e cada marca complementa a outra. E cada uma faz com que você se sinta melhor em relação ao seu desempenho. Nosso objetivo é transformar inspiração em sucesso. Você pode vêla em nossos processos e em nossos produtos. Você pode senti-la em seu trabalho.

Seu trabalho deve funcionar como você quer - com o melhor de sua habilidade. Cada pessoa. Cada peça de equipamento integra-se com a seguinte. Cada marca conecta você com seus pacientes e todo o processo funciona. No final, o seu trabalho é um reflexo de você. Ele deve inspirar confiança. Ele deve comunicar confiança. Ele deve funcionar.

Grupo KaVo Kerr. Inspiring Best Practices.













SybronEndo -CAT











twitter.com/kavokerr

youtube.com/kavodobrasil



facebook.com/kavodobrasil 👢



plus.google.com/+kavokerr





www.kavo.com.br

Fábrica KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda Rua Chapecó, 86 CEP 89221-040 - Joinville/SC Fone: (47) 3451 0100

Filial KaVo no Brasil - São Paulo

Rua Alameda dos Aicás 527, Moema - CEP 04086-001 - São Paulo/SP Fone: (11) 3323 0500